




PIEDE DIABETICO

Flen Health
guarigione avanzata della cute

Piede diabetico: triplice azione per gestire l'infezione e accelerare la guarigione

Debridement autolitico, gestione dell'essudato
e azione antimicrobica in un unico trattamento.

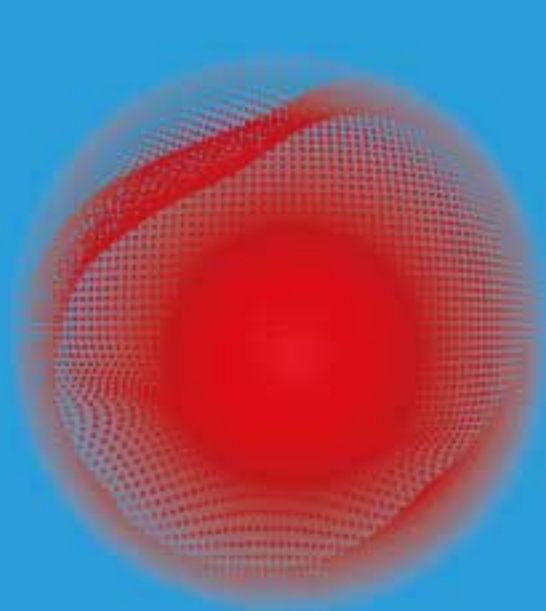

CE 0344

Una soluzione unica
per la cura delle ferite



Flaminol®

→ **Piede diabetico: dati epidemiologici**



Alcuni dati epidemiologici:

- **Oltre 6 milioni di ulcere del piede diabetico (DFU)** all'anno in tutto il mondo (circa una DFU ogni 2 secondi)
- Il **19-34%** delle persone con diabete **svilupperà un'ulcera** nel corso della sua vita
- Circa il **50%** delle DFU ha un **rischio di infezione**
- Il **20%** delle ulcere infette viene **ricoverato in ospedale**
- Il **rischio di morte a 5 anni** per un paziente con DFU è **2,5 volte superiore** rispetto a un paziente senza

→ **Sfide clinico-assistenziali**



La **gestione della lesione ulcerativa** è una sfida clinica che parte dall'inquadramento della lesione e della sua severità: **scarico dell'ulcera, ripristino circolazione periferica, gestione dell'infezione, gestione delle comorbidità e adeguato wound care.**

Non tutti i pazienti possono essere trattati per via chirurgica. È importante eseguire un wound care adeguato:

- Mantenendo l'ambiente umido
- Rimuovendo l'essudato in eccesso
- Evitando macerazione peri-lesionale
- Favorendo il debridement
- Garantendo tollerabilità e sicurezza, con attenzione a ridurre il numero delle visite e quindi i costi

Flaminal → **una soluzione integrata**

Flaminal® è una **medicazione antimicrobica** che supporta la gestione avanzata delle ulcere del piede diabetico senza impatto sull'AMR grazie alla sua **triplice azione**:

- ✓ **Debridement autolitico**
- ✓ **Gestione dell'essudato**
- ✓ **Azione antimicrobica**



Favorendo:

- ✓ **Riduzione della carica batterica e del biofilm**
- ✓ **Mantenimento di un ambiente umido ottimale**
- ✓ **Minor necessità di cambi di medicazione**
- ✓ **Supporto al processo di guarigione**

Con un impatto positivo sui risultati clinici e sui costi complessivi di gestione.




| Come cambia il **TIME** con

Flaminal®?

La risposta alle diverse esigenze di guarigione delle ferite in un'unica soluzione



Per tutte le fasi del continuum dell'infezione della ferita

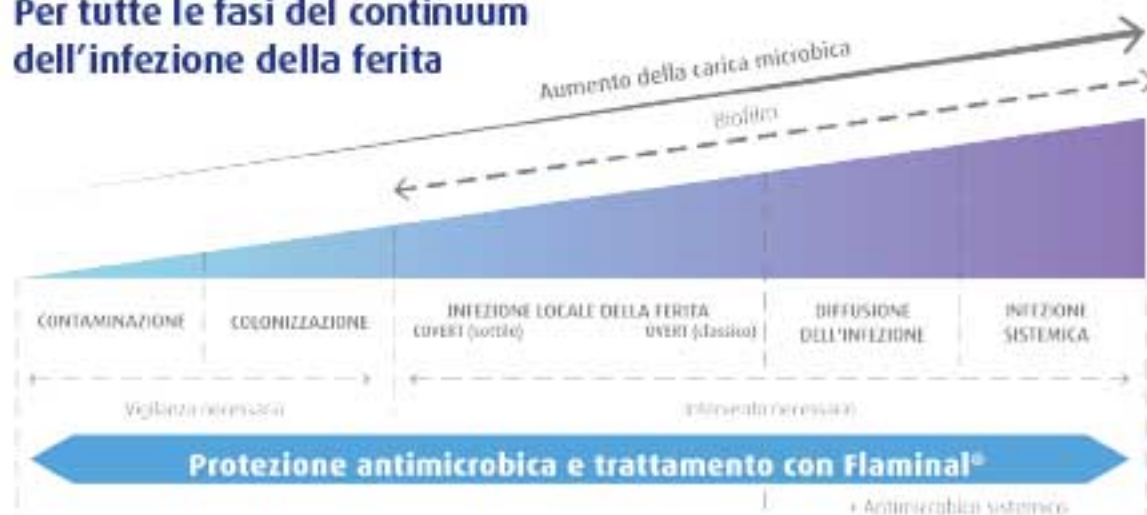

→ Lesione metatarsale in paziente con osteomielite



Dott. Marco Meloni

*Centro Piede diabetico
UOC Endocrinologia e
Diabetologia Policlinico
Universitario Roma
Tor Vergata*



Donna, 52 anni

*Anamnesi: Diabete tipo 2 da 8 anni.
Neuropatia periferica e osteomielite
del piede (1° metatarso-falangea destra).*

Trattamento precedente: infezione a carico dei tessuti molli e dell'osso.
Si decide di procedere con trattamento di seconda intenzione per soprassedere all'atto chirurgico.

→ Stato Iniziale - 18/03/2025

Applicazione di **Flaminal® Hydro**.



In corso di trattamento - 18/04/2025

Dopo 1 mese si prosegue il trattamento con **Flaminal® Hydro** fino a guarigione.



→ Impatto di Flaminal® sulla guarigione



La terapia antibiotica sistemica, l'azione antimicrobica di **Flaminal® Hydro** e la possibilità di eseguire debridement autolitico hanno permesso di portare a guarigione la lesione senza dover eseguire un'azione chirurgica, evitando il rischio di osteotomia metatarsale con possibile deformità post chirurgica.

Vantaggi di Flaminal®



La formulazione di **Flaminal® Hydro** ha permesso di eseguire uno sbrigliamento senza azione chirurgica, portando a guarigione in 7 settimane la lesione che inizialmente era di 3,5 x 2,8 cm.

Guarigione



06/05/2025



→ Gangrena del secondo dito



Dott. Marco Meloni

Centro Piede diabetico
UOC Endocrinologia e
Diabetologia Policlinico
Universitario Roma
Tor Vergata



Uomo, 73 anni

Anamnesi: Paziente diabetico con diabete tipo 2 da 22 anni. Neuro-vasculopatia periferica. Presenta una gangrena 2° dito del piede destro + flemmone ascessualizzato plantare e dorsale.



Trattamento precedente: Il paziente viene preso in carico il 09/04/2025. Viene trattato con terapia antibiotica sistemica. Si eseguono: rivascolarizzazione dell'arto inferiore, amputazione urgente del 2° raggio e drenaggio del flemmone dorsale. Segue terapia ricostruttiva con NPWT e Innesto dermico.



→ Stato Iniziale - 13/05/2025

Dopo la rimozione dello strato di silicone dell'Innesto, inizia il trattamento locale con **Flaminal® Hydro**, associato alla best medical therapy.



In corso di trattamento - 17/07/2025

Dopo 2 mesi di trattamento con **Flaminal® Hydro**, prosegue lo stesso trattamento locale documentando un controllo dell'essudato e una riduzione della superficie dell'ulcera.



→ Impatto di Flaminal® sulla guarigione



Il trattamento con **Flaminal® Hydro** ha portato a guarigione completa la lesione (che inizialmente misurava 10 cm x 3 cm) con minima disepitelizzazione interdigitale nell'arco di poco meno di 4 mesi.

Vantaggi di Flaminal®



L'utilizzo di **Flaminal® Hydro** ha permesso un ottimo controllo dell'ambiente dell'ulcera (riducendo significativamente la quota di essudato e il rischio di proliferazione batterica) e favorendo allo stesso tempo tutti i meccanismi riparativi.


Guarigione



05/09/2025



Flaminal®

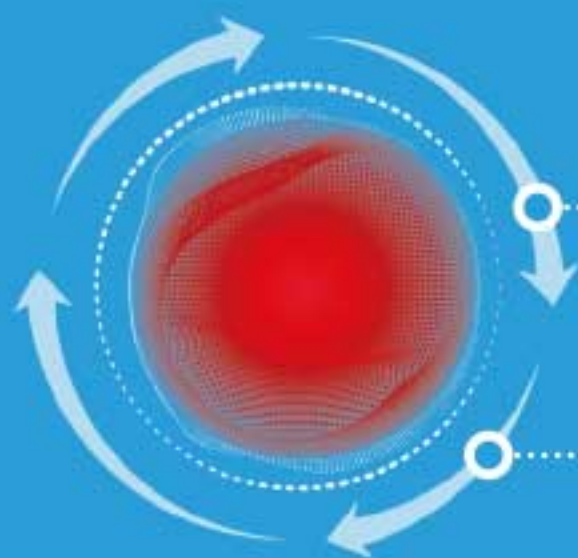

CE 0344

Una soluzione unica
per la cura delle ferite

Flaminal® Hydro

Per ferite con essudato
leggero o moderato

Dimens. Conf.	Codice Prodotto
25 g	1031
50 g	1021
500 g	1010

Flaminal® Forte

Per ferite con essudato
moderato o abbondante

Dimens. Conf.	Codice Prodotto
25 g	1033
50 g	1015
500 g	1016

Una volta aperto, e se richiuso con cura, un tubetto di Flaminal® (Hydro o Forte) può essere conservato a temperatura ambiente e utilizzato per 12 mesi.

I vasetti possono essere utilizzati per 1 settimana.

Bibliografia:

1. Wounds International Rippen luglio 2005. 2. International Consensus Update 2022 - International Wound Infection Institute. 3. Cooper RA (2013) Inhibition of biofilms by glucose oxidase, lactoperoxidase and guaiac: the active antibacterial component in an enzyme alginate®. Int Wound J 10(5): 430-7. 4. De Smet, K. et al. Pre-clinical evaluation of a new antimicrobial enzyme for the control of wound biofilms. Wounds 2009; 21(5): 45-73. 5. Foglietta illustrativa.



Inquadrare
il Qr code
per entrare in
contatto con noi



infoitaly@flenhealth.com