




ULCERE DA PRESSIONE

Flen Health
guarigione avanzata della cute

Ulcere da pressione: triplice azione per una gestione completa della lesione

Debridement autolitico, gestione dell'essudato
e azione antimicrobica in un unico trattamento.

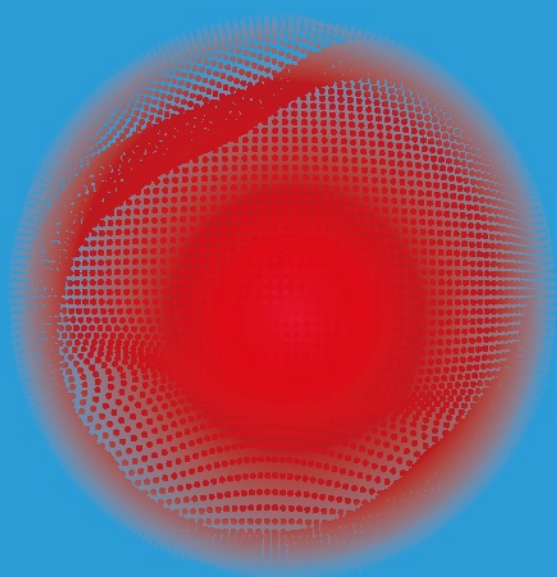

CE 0344

Una soluzione unica
per la cura delle ferite



Flaminal®

→ *Ulcere da Pressione: inquadramento della patologia*



Le **ulcere da pressione (PU)** sono ferite croniche complesse, causate da pressione prolungata, frizione o forze di taglio, che determinano ischemia tissutale e necrosi e sorgono in pazienti:

- Allettati o con mobilità ridotta
- Anziani e fragili
- Con patologie croniche e comorbidità

→ *Sfide clinico-assistenziali*



La **gestione delle PU** rappresenta una sfida significativa per clinici e caregiver:

- **Necessità di debridement continuo** per rimuovere tessuto devitalizzato
- **Controllo dell'essudato** per prevenire macerazione dei tessuti perilesionali
- **Gestione della carica microbica** e prevenzione delle infezioni
- **Alta frequenza dei cambi di medicazione** con conseguente impatto sul tempo infermieristico
- **Costi complessivi elevati** (materiali, personale, complicanze)
- Rischio di **utilizzo inappropriato di antimicrobici topici** → contributo all'**AMR***

*Antimicrobico resistenza

Flaminal® → *una soluzione integrata*

Flaminal® è una medicazione antimicrobica che supporta la gestione avanzata delle ulcere da pressione senza impatto sull'AMR grazie alla sua triplice azione:

- ✓ **Debridement autolitico**
- ✓ **Gestione dell'essudato**
- ✓ **Azione antimicrobica**



Favorendo:

- ✓ **Riduzione della carica batterica e del biofilm**
- ✓ **Mantenimento di un ambiente umido ottimale**
- ✓ **Minor necessità di cambi di medicazione**
- ✓ **Supporto al processo di guarigione**

Con un impatto positivo sui risultati clinici e sui costi complessivi di gestione.



→ Una lesione sacrale particolare



Dott. Diego Ceci

Infermiere wound specialist



Uomo, 48 anni

Anamnesi: Paziente paraplegico per trauma stradale dal 2024. Portatore di stomia.

Trattamento precedente: Il paziente arriva ad ottobre 2024 a seguito di un trattamento domiciliare con medicazioni antisettiche assorbenti. Durante il trattamento domiciliare viene eseguito sbrigliamento autolitico, la lesione era molto essudante. In data 02/10/2024 si effettua, presso A.O.U. Sant'Andrea, un tampone che risulta positivo a *Proteus vulgaris* e *Streptococcus agalactiae* e si esegue sbrigliamento chirurgico. Per 6 mesi viene utilizzata una medicazione con fibra gelificante in argento con un buon esito, poi la guarigione si ferma.

→ Stato Iniziale - 05/05/2025

Inizia trattamento con **Flaminal® Forte**, garza grassa e garza in cotone a quattro strati. Si riscontra una ripartenza della guarigione della lesione.



In corso di trattamento - 02/07/2025

Dopo 6 settimane di utilizzo di **Flaminal® Forte**, la lesione è meno essudante, quindi si passa a **Flaminal® Hydro** e si prosegue fino a guarigione.



→ Impatto di **Flaminal®** sulla guarigione



Il trattamento con **Flaminal® Forte** ha permesso una riduzione significativa delle dimensioni e della profondità della lesione già nei primi due mesi di trattamento. L'azione di **Flaminal® Hydro** ha invece permesso di portare a guarigione la lesione dopo aver gestito efficacemente l'essudato.

Vantaggi di **Flaminal®**



Considerando la lesione aperta dal 2024, **Flaminal®** ha permesso la ripartenza della guarigione e **ridotto la necessità di eccessivi cambi con medicazioni primarie avanzate e medicazioni superassorbenti.**

Flaminal® ha consentito la riduzione dei cambi di medicazione passando da ogni 24 ore a 48 ore.

Grazie alla semplicità d'uso - in caso di necessità - il cambio è stato effettuato dal caregiver.


Guarigione



28/02/2026



Flaminal®

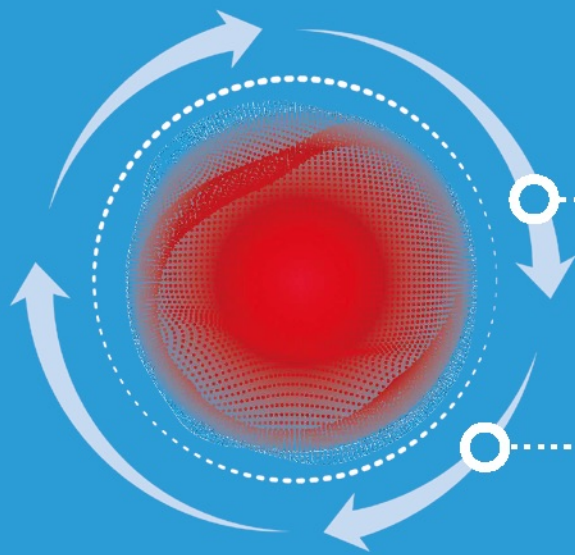

CE 0344

Una soluzione unica
per la cura delle ferite

Flaminal® Hydro

Per ferite con essudato
leggero o moderato

Dimens. Conf.	Codice Prodotto
25 g	1031
50 g	1021
500 g	1010

Flaminal® Forte

Per ferite con essudato
moderato o abbondante

Dimens. Conf.	Codice Prodotto
25 g	1033
50 g	1015
500 g	1016

Una volta aperto, e se richiuso con cura, un tubetto di Flaminal® (Hydro o Forte) può essere conservato a temperatura ambiente e utilizzato per 12 mesi.

I vasetti possono essere utilizzati per 1 settimana.

Bibliografia:

1. Wounds International Rippon Luglio 2025. 2. International Consensus Update 2022 - Intermation Wound Infection Institute. 3. Cooper RA (2013) Inhibition of biofilms by glucose oxidase, lactoperoxidase and guaiacol: the active antibacterial component in an enzyme alginateP. Int Wound J 10(6): 630-7. 4. De Smet, K. et al. Pre-clinical evaluation of a new antimicrobial enzyme for the control of wound bioburden. Wounds. 2009; 21(3): 65-73. 5. Foglietto illustrativo.



Inquadrare
il Qr code
per saperne
di più



infoitaly@flenhealth.com