



Bi-Baby

Latex
FREE



Superficie antidecubito reattiva per prematuri e neonati a rischio di sviluppare lesioni da pressione.


BICOMPONENTE RADIOTRASPARENTE

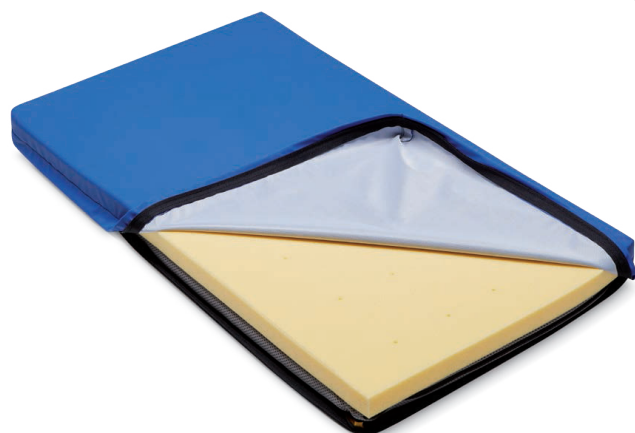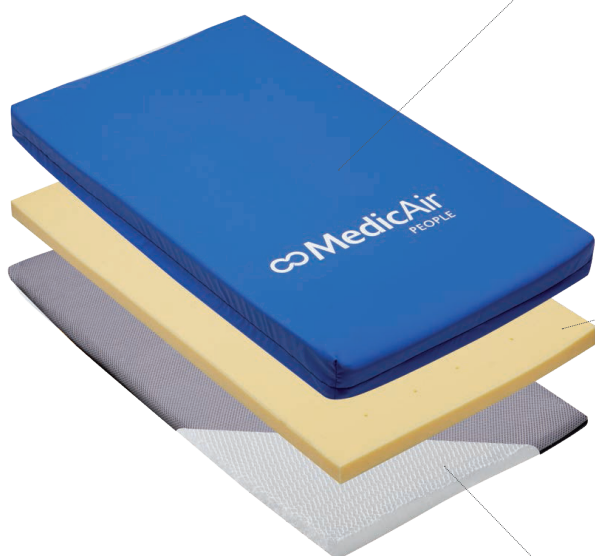

COVER DI RIVESTIMENTO

Tessuto bielastico in spalmato di poliuretano


- Alta scorrevolezza per una riduzione delle forze di attrito. Protegge e riduce il rischio di danno alla cute dovuto a frizione.
- Impermeabile e traspirante per un'ottimale gestione della temperatura corporea del neonato.
- Antistatico, batteriostatico, antiallergico, antimicrobico, antifungino, Latex Free.
- Sanificabile e sostituibile grazie alla cerniera perimetrale.

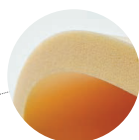

SCHIUMA VISCOELASTICA

Materiale di contatto a lenta memoria

- Superficie ad alta densità (50 kg/m^3) e resiliente, attraversata in tutta la sua lunghezza da fori verticali che favoriscono una migliore circolazione dell'aria.
- Sensibile al calore del corpo, permette di adattarsi perfettamente alla morfologia del neonato riducendo al massimo le pressioni di interfaccia.

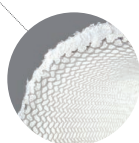

MISTRAL

Tessuto tridimensionale ad alta tecnologia


- Costituito verticalmente da filamenti in poliestere che creano delle micro-molle in grado di sostenere il corpo del neonato, distribuendo le forze sulla massima superficie possibile.
- Materiale ad elevata traspirabilità (grazie alla sua struttura a maglie) che consente l'ottimale circolazione dell'aria, garantendo un microclima adeguato e riducendo la proliferazione batterica.
- Idrorepellente, anallergico e riciclabile.

 **MedicAir**
PEOPLE

 **ServiceMed**
HUMAN WIDE CARE


PER INFORMAZIONI E ACQUISTI CONTATTACI:

www.medicair.it / www.servicemed.it / n. verde 800 688 841 / tel. 045 6717441 / info@servicemed.it

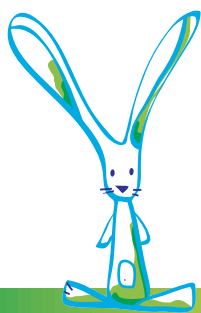

FLOW

PEDIATRIC

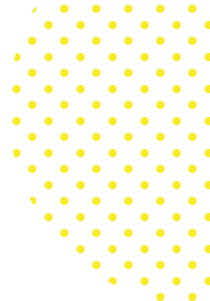

Sistema antidecubito ad aria progettato e sviluppato per il paziente pediatrico (da 9 kg a 38 kg) a rischio di sviluppare lesioni da pressione, completamente sostitutivo del materasso ospedaliero.

Il sistema, nella sua complessità, interviene attivamente sulle cause estrinseche determinanti le lesioni da pressione del paziente pediatrico distribuendo e/o scaricando le pressioni da contatto. Attraverso le diverse modalità di funzionamento, è in grado di gestire i carichi tissutali, il microclima cutaneo e le forze di frizione.

Latex
FREE



COVER

- Cover completamente rimovibile e sanificabile.
- In poliuretano, bielastica, impermeabile, traspirante, Latex Free e radiotrasparente.

COMPRESSORE

- Compressore con doppio motore: maggiore resistenza, non surriscalda l'aria, mantiene invariata la temperatura corporea del bambino.
- Display con visualizzazione di tutte le impostazioni inserite, intuitivo e di facile utilizzo.
- Regolazione del peso al fine di rendere la superficie più precisa ed efficace.
- Privo di angoli vivi.
- Funzionalità dinamica e a bassa pressione continua.
- Funzione nursing per favorire la mobilizzazione e le attività assistenziali: ritorno automatico dopo 20 minuti.
- Funzione seating per garantire maggior supporto a livello del sacro.
- Tastiera antibatterica.
- Energy saver.

PLUS

- 19 celle in poliuretano del diametro di 7 cm, suddivise in zone differenziate (testa/tronco e talloni), che permettono un sostegno efficace del bambino garantendo comfort e una corretta postura.
- Microprocessore all'interno del compressore che provvede a regolarizzare le pressioni di esercizio nelle varie zone corporee.
- Base di supporto in poliuretano espanso.
- Modalità transport: gonfio per 12 ore senza alimentazione elettrica.
- Esclusione di ogni singola cella per personalizzare al massimo l'assistenza, scaricando completamente - in modo sezionale - le pressioni di contatto ove necessario.
- Radiotrasparente.

MedicAir
PEOPLE

ServiceMed
HUMAN WIDE CARE

PER INFORMAZIONI E ACQUISTI CONTATTACI:

www.medicair.it / www.servicemed.it / n. verde 800 688 841 / tel. 045 6717441 / info@servicemed.it